

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文仿單。但
如市售醫療器材同時放置中、外文仿單者，外文仿單
內容須與核定本之中文仿單內容相符。

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)	申請廠商	新加坡商康威特股份有限公司台灣分公司
--------	------------------	------	--------------------

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)

DuoDERM Extra Thin CGF Dressing

衛署醫器輸字第 007729 號

製造批號/保存期限：詳見外包裝(西元年-月)

製造廠名稱：ConvaTec Inc.

製造廠地址：211 American Avenue, Greensboro, North Carolina 27409, USA

藥商名稱：新加坡商康威特股份有限公司台灣分公司

藥商地址：臺北市松山區敦化北路 205 號 6 樓(605 室)

105. 12. 23



- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

105.12.23

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮) DuoDERM Extra Thin CGF Dressing 表皮皮膚潰瘍的保護和護理

衛署醫器輸字第 007729 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

【產品說明】

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)具高度柔軟性,使用於乾燥或有輕微滲出液之傷口。本滅菌親水性敷料特別適用於擦傷處或曲折處傷口,如手肘與足跟。

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)能與傷口之滲出液相作用產生一柔軟而濕潤之凝膠,於敷料更換時,由於有此凝膠能使新形成的組織,不會受到絲毫損傷。本敷料能隔離傷口,避免細菌及其它外在環境更進一步感染。

【適應症】

- 乾燥與輕微滲出液之表皮皮膚潰瘍
- 開刀後之傷口
- 保護性敷料

【禁忌】

對康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)或其成分敏感或有過敏反應的人忌用。

【注意事項與觀察】

使用於皮膚潰瘍時:

1. 初次使用本敷料時,需依醫護人員指示使用。
2. 本敷料僅提供局部傷口治療用,於治療慢性傷口時,其它護理之必需方法,如常為患者更換姿勢與營養之補給,仍不可忽略。
3. 傷口增大:於明顯之表層皮膚潰瘍,常已有深部組織之損傷。於壞死組織存在下,使用任何一種閉合用傷口敷料,在其治療初期當壞死組織被清除後,傷口常會變得更大更深。由血管炎造成之下肢潰瘍,當潛在疾病加劇時,其下肢潰瘍也可能會迅速惡化。

異味:使用康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)於一般傷口常伴有令人不悅之異味產生,尤其以較大傷口或壞死傷口為然。這並不表示傷口有被感染,當傷口洗淨時,其異味將完全消失。(請參見感染一節)

感染:如有臨床感染發生時,則必須在傷口部位採樣做細菌培養。其臨床表徵如:非特異性之異味產生,滲出液之顏色改變,發燒與蜂窩組織炎(在傷口部位呈現柔軟及紅色部位)。如有出現感染臨床徵兆時,應採取適當治療。並遵照臨床醫師的建議,決定是否繼續使用本品。

敷料之準備與傷口之清洗:

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)已經完全滅菌處理,因此使用時需適當使用。

選擇一片康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮),其面積大小至少須超過傷口週邊3公分以上,依醫院常規將傷口清洗乾淨,再以生理食鹽水沖洗傷口,並將傷口皮膚周邊擦乾,以確證傷口周邊皮膚無任何油性物質存在。

【使用方法】

1. 儘量減少手指與敷料黏貼面之接觸。
2. 使用手指滾動方式,將本品貼在患部,絕對不要用力拉。
3. 輕柔使敷料黏貼完整,尤其是敷料邊緣,要特別注意。
4. 黏貼於後腳跟或手肘時,可於本敷料每一邊橫切一道約1/3的切口,以幫助敷料之敷貼。
5. a. 黏貼於薦骨部位時,則需將本品確實輕壓入肛門皺褶內。
b. 視薦骨潰瘍的部位及深度,使用三角型的敷料旋轉不同方向敷貼。
6. 此方向有利於敷料接近肛門的潰瘍部位。
7. 使用無刺激性膠帶黏貼於本品四週,以避免本品掀開。

【移除敷料】

用手壓下本敷料周圍之皮膚,並輕掀起敷料之一角,將本敷料四角都以同樣方式掀起,再將本敷料完全掀起。重新清洗傷口,並不需要將傷口周圍皮膚所殘留敷料完全清除乾淨。

只要患者覺得舒適,無滲漏與無感染之臨床徵象時,本敷料(人工皮)可黏貼於傷口達7日之久。

【包裝】

訂購編號	規格	包裝數量
187955	4"X4" (10x10 cm)	10 片
187957	6"X6" (15x15 cm)	10 片
187900	2"X4" (5x10 cm)	20 片
187961	2"X8" (5x20 cm)	10 片



切勿重複使用



針線滅菌



訂購編號



保持乾燥



室溫存放



包裝如有破損請勿使用



使用時請參閱使用說明



製造批號



保存期限



法定製造廠

製造廠名稱: ConvaTec Inc.

製造廠地址: 211 American Avenue, Greensboro, North Carolina 27409, USA

藥商名稱: 新加坡商康威特股份有限公司台灣分公司

藥商地址: 臺北市松山區敦化北路205號6樓(605室)





2 684551 106911

DuoDERM™
Extra Thin
10 4 in. x 4 in. / 10cm x 10cm

REF 187955

DuoDERM™
Extra Thin

4 in. x 4 in. / 10cm x 10cm

Extra Thin CGF™ Dressing

For the protection and management of superficial dermal ulcers.

Apósito DuoDerm™ CGF™ extra delgado

Para protección y tratamiento de úlceras dérmicas superficiales.

Pansements DuoDerm™ CGF™ extra minces

Pour la protection et les soins des ulcères dermiques superficiels.



10

STERILE [R]

REF 187955

Made in USA/Fabricado en EE.UU./Fabriqué aux États-Unis

NO VARNISH / NO PRINT AREA



DuoDERM™
Extra Thin

REF 187955

10 4 in. x 4 in. / 10cm x 10cm



Keep dry.



Do Not Reuse.



Store at Room Temperature.



Consult Instructions for Use.



Convatec

Convatec Inc.
Greensboro, NC 27409
USA
1-800-422-8811



© 2015 Convatec Inc.
®/™ indicates a trademark of Convatec Inc.
Convatec Limited, Deeside, CH6 2NU, UK

www.convatec.com
1704732G1

L1988A

L1988 / L1988A

Do Not Print Cyan

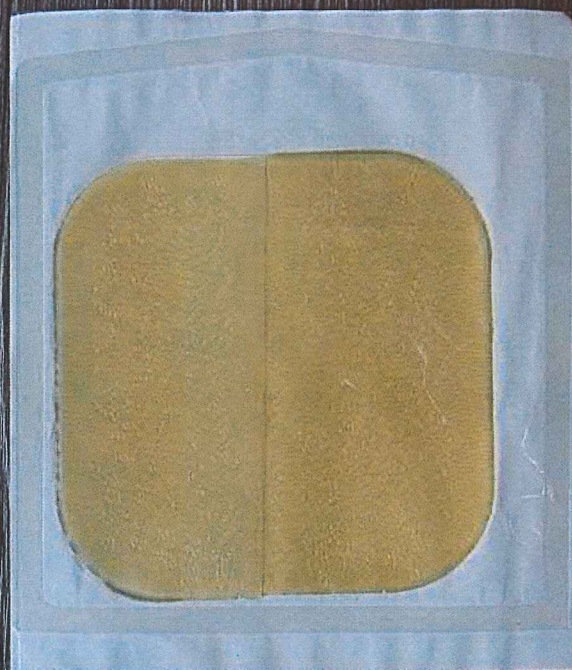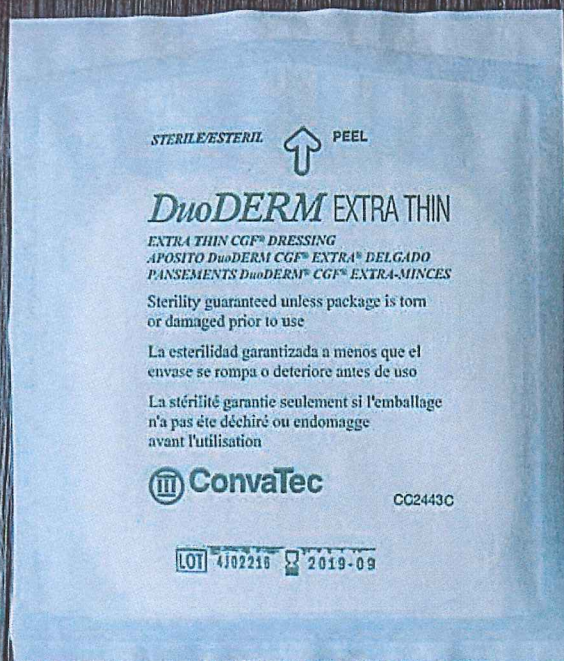

訂購編號: 187955



訂購編號: 187900





訂購編號: 187957



訂購編號: 187961

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)

DuoDERM Extra Thin CGF Dressing

表皮皮膚潰瘍的保護和護理

衛署醫器輸字第 007729 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

【產品說明】

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)具高度柔軟性,使用於乾燥或有輕微滲出液之傷口。本滅菌親水性敷料特別適用於擦傷處或曲折處傷口,如手肘與足跟。

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)能與傷口之滲出液相作用產生一柔軟而潤滑之凝膠,於敷料更換時,由於有此凝膠能使新形成的組織,不會受到絲毫損傷。本敷料能隔離傷口,避免細菌及其它外在環境更進一步感染。

【適應症】

- 乾燥與輕微滲出液之表皮皮膚潰瘍
- 開刀後之傷口
- 保護性敷料

【禁忌】

對康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)或其成分敏感或有過敏反應的人禁用。

【注意事項與觀察】

使用於皮膚潰瘍時:

4. 初次使用本敷料時,需依醫護人員指示使用。
5. 本敷料僅提供局部傷口治療用,於治療慢性傷口時,其它護理之必需方法,如常為患者更換姿勢與營養之補給,仍不可忽略。
6. 傷口增大:於明顯之表層皮膚潰瘍,常已有深部組織之損傷。於壞死組織存在下,使用任何一種閉合用傷口敷料,在其治療初期當壞死組織被清除後,傷口常會變得更大更深。由血管炎造成之下肢潰瘍,當潛在疾病加劇時,其下肢潰瘍也可能會迅速惡化。

異味:使用康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)於一般傷口常伴有令人不悅之異味產生,尤其以較大傷口或壞死傷口為然。這並不表示傷口有被感染,當傷口洗淨時,其異味將完全消失。(請參見感染一節)

感染:如有臨床感染發生時,則必須在傷口部位採樣做細菌培養。其臨床表徵如:非特異性之異味產生,滲出液之顏色改變,發燒與蜂窩組織炎(在傷口部位呈現柔軟及紅色部位)。如有出現感染臨床徵兆時,應採取適當治療。並遵照臨床醫師的建議,決定是否繼續使用本品。

敷料之準備與傷口之清洗:

康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮)已經完全滅菌處理,因此使用時需適當使用。

選擇一片康威 多愛膚超薄型敷料(人工皮),其面積大小至少須超過傷口週邊3公分以上,依醫院常規將傷口清洗乾淨,再以生理食鹽水沖洗傷口,並將傷口皮膚周邊擦乾,以確認傷口周邊皮膚無任何油性物質存在。

【使用方法】

1. 儘量減少手指與敷料黏貼面之接觸。
2. 使用手指滾動方式,將本品貼在患部,絕對不要用力拉。
3. 輕柔使敷料黏貼完整,尤其是敷料邊緣,要特別注意。
4. 黏貼於後腳跟或手肘時,可於本敷料每一邊橫切一道約 1/3 的切口,以幫助敷料之敷貼。
5. a. 黏貼於薦骨部位時,則需將本品確實輕壓入肛門皺褶內。
b. 視薦骨潰瘍的部位及深度,使用三角型的敷料旋轉不同方向敷貼。
6. 此方向有利於敷料接近肛門的潰瘍部位。
7. 使用無刺激性膠帶黏貼於本品四週,以避免本品掀開。

【移除敷料】

用手壓下本敷料周圍之皮膚,並輕掀起敷料之一角,將本敷料四角都以同樣方式掀起,再將本敷料完全掀起。重新清洗傷口,並不需要將傷口周圍皮膚所殘留敷料完全清除乾淨。

只要患者覺得舒適,無滲漏與無感染之臨床徵象時,本敷料(人工皮)可黏貼於傷口達7日之久。

【包裝】

訂購編號	包裝碼	規格	包裝數量
187955	B	4"X4" (10x10 cm)	1 片
187957	B	6"X6" (15x15 cm)	1 片
187900	B	2"X4" (5x10 cm)	1 片
187961	B	2"X8" (5x20 cm)	1 片



切勿重複使用



STERILE REF 射線滅菌



訂購編號



保持乾燥



室溫存放



包裝如有破損請勿使用



使用時請參閱使用說明



製造批號



保存期限



法定製造廠

製造廠名稱: ConvaTec Inc.


製造廠地址: 211 American Avenue, Greensboro, North Carolina 27409, USA



藥商名稱: 新加坡商康威特股份有限公司台灣分公司

藥商地址: 臺北市松山區敦化北路205號6樓(605室)

國內包裝廠名稱: 星捷科技有限公司

國內包裝廠地址: 桃園市桃園區汴洲里春日路1492之5號3樓

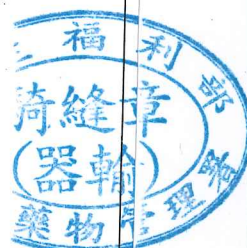

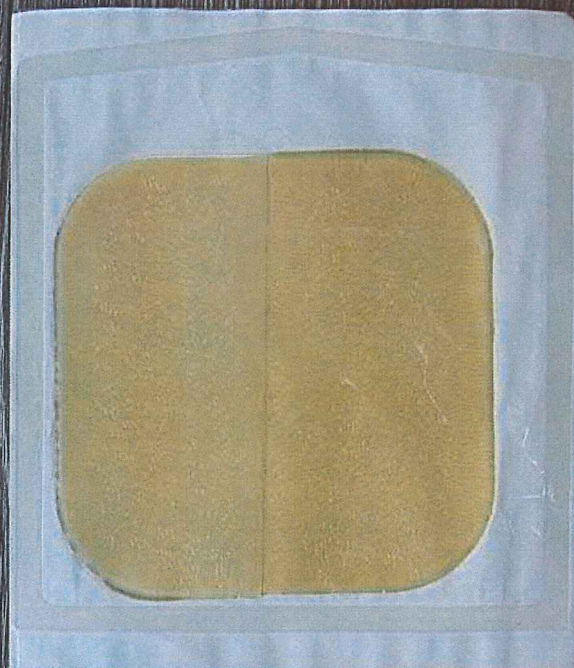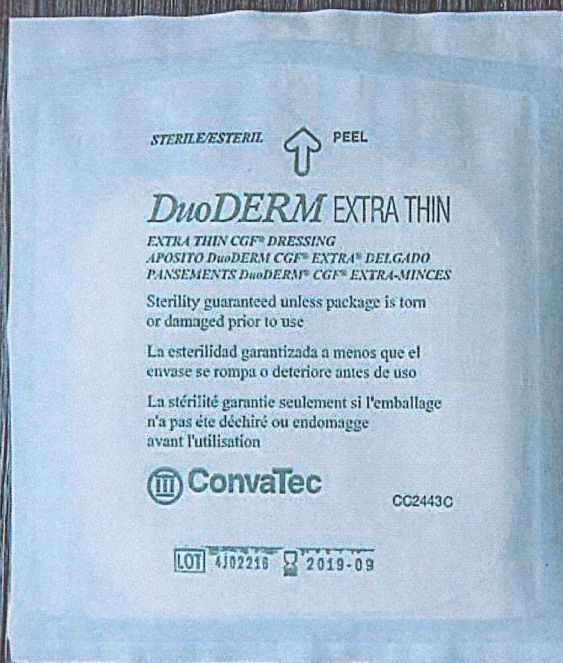

訂購編號: 187955




訂購編號: 187900





訂購編號: 187957

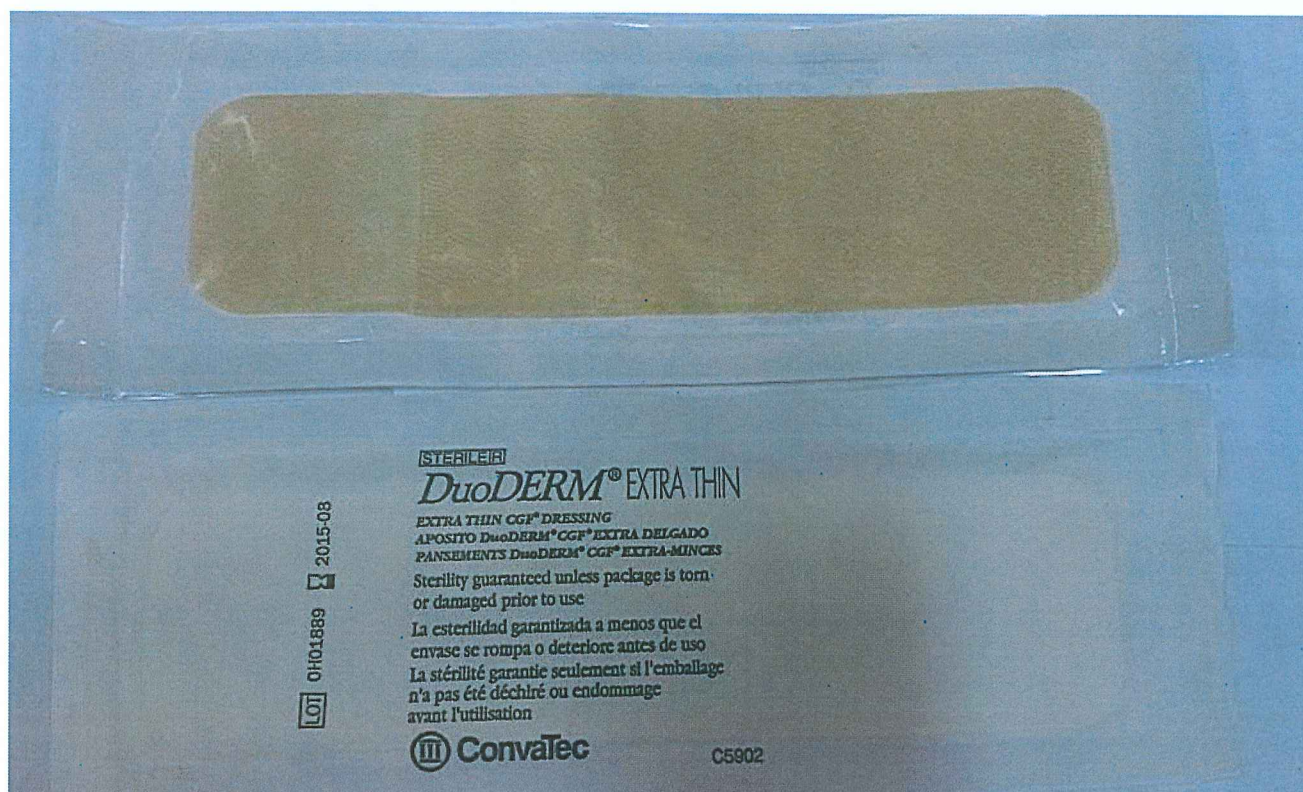

訂購編號: 187961